

10° PASSO: Desinfecte a pele com álcool e algodão e deixe evaporar. Insira a agulha na pele, e depois pressione o botão de aplicação e segure até a janela de dose mostre 0 por pelo menos 10 segundos.



IMPORTANTE



APÓS O USO A CANETA NÃO DEVE SER DESCARTADA, POIS ELA PODE SER REUTILIZADA POR ATÉ 3 ANOS.

11° PASSO: Coloque a tampa externa na agulha e quando a agulha estiver tampada, desenrosque a agulha e descarte-a em um recipiente de plástico firme (garrafa pet ou de amaciante).



12° PASSO: Depois de tirar a agulha, tampe a caneta e guarde fora da geladeira.



ORIENTAÇÕES GERAIS

- ARMAZENAR A INSULINA EM TEMPERATURA ENTRE 2 E 8°C.
- MANTENHA SEMPRE O CARPULE DENTRO DA CAIXA QUANDO NÃO ESTIVEREM EM USO PARA PROTEGÊ-LO DA LUZ.
- ANTES DO 1° USO: DEVE SER RETIRADA 30 MINUTOS ANTES DA GELADEIRA, PARA PERMITIR QUE ATINJA A TEMPERATURA AMBIENTE.
- O PRODUTO DEVE SER MANTIDO LONGE DA LUZ SOLAR DIRETA E CHUVA.
- APÓS ABERTO: DEVE SER ARMAZENADO EM TEMPERATURA AMBIENTE POR NO MÁXIMO 4 SEMANAS (1 MÊS).
- ARMAZENAR EM AMBIENTE FRESCO, SECO E LIMPO.
- TRANSPORTE DA INSULINA ATÉ A CASA:
 - precisa ser em isopor ou caixa térmica com gelo.
 - LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA CANETA: algodão umedecido em álcool

Uso correto da nova caneta de insulina do SUS

CUIDADO FARMACÊUTICO



Farm: Ketlen Martins de Matos
CRF/MG: 52177



Para aplicação correta da insulina, é necessário alguns passos:


1ºPASSO

- Lavar as mãos antes da utilização;
- Tirar a tampa da insulina que irá usar e identificar.



2º PASSO: Identificar qual insulina irá utilizar.

- Insulina Humana R (REGULAR)
- Insulina Humana N (NPH)

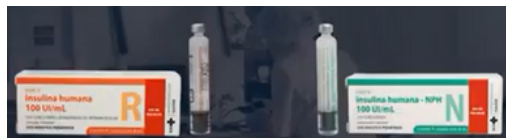


3ºPASSO: Remova a tampa da caneta e desrosqueie o suporte do carpule.



4ºPASSO: Antes de cada uso, verifique o rótulo do carpule para confirmar que é a insulina que precise para a injeção.

5ºPASSO: Coloque o carpule no suporte para carpule com a tampa de alumínio voltada para a frente.

6ºPASSO: Gire o corpo da caneta com firmeza para travá-lo com suporte do carpule através da rosca. Se for utilizada a insulina NPH, enrole e agite por 10x.

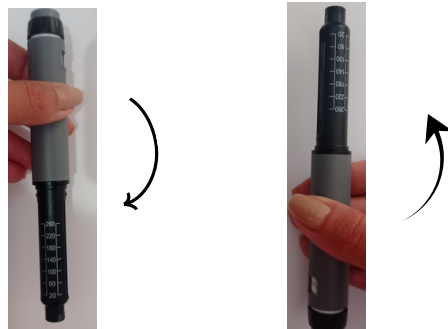

7ºPASSO: Substitua as agulhas conforme orientação do farmacêutico. Limpe a vedação da borracha para desinfecção.



8ºPASSO: Retire a agulha e fixe com cuidado no suporte do carpule. A agulha deve estar instalada em linha reta.



9º PASSO: Gire os botões para serem selecionados 2 UI para teste;



! Caso a gota de insulina não aparecer, repita o teste por mais 2x. Se ainda assim, a gota não aparecer, substitua a agulha!

LOCAIS DE APLICAÇÃO

